



CE

HSD

---

<b>ITALIANO</b>	<b>Programmi per l'uso estetico &amp; benessere</b>	<b>PAGE 3-5</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>Programs for Aesthetic &amp; Wellness use</b>	<b>PAGE 8-10</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>Programmes à usage esthétique &amp; bien-être</b>	<b>PAGE 11-14</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>Programas de uso estético &amp; bienestar</b>	<b>PAGE 15-18</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>Programme für Beauty &amp; Wellness</b>	<b>PAGE 19-22</b>

# ----- ITALIANO -----



## Programmi Estetici-Benessere

### *Informazioni*

*Nei programmi in cui la zona del corpo da trattare lo permette si può sostituire l'uso del manipolo ad ultrasuoni con i diffusori a doppia testina.*

## PROGRAMMI

Note applicative per utilizzare correttamente l'apparecchio, sapendo quale programma scegliere e l'azione che esso svolge, combattendo così il proprio inestetismo il più efficacemente possibile.

### Urto

**AZIONE** L'irradiazione ultrasonora in questa azione determina un massaggio di notevole intensità, che per mezzo delle oscillazioni penetra più in profondità nell'epidermide.

**QUANDO** Va utilizzato in tutti quegli stadi avanzati di cellulite localizzata, specialmente nel caso di cellulite molle o flaccida.

### Modellante

**AZIONE** Questa terapia viene utilizzata ampiamente nei casi di lipodistrofie localizzate rompendo il tessuto fibronico presente che ostacola la circolazione sia ematica che linfatica.

**QUANDO** Beneficiando della sua caratteristica nel modellare e stimolare è particolarmente indicato nel caso di cellulite dura o solida.

### Mantenimento

**AZIONE** Il suo effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna distrettuale, migliora il trofismo cutaneo e l'ossigenazione cellulare, liberando i liquidi in eccesso e le tossine dal connettivo sottocutaneo.

**QUANDO** È indicato come mantenimento del ciclo di sedute svolte, per non perdere i risultati raggiunti.

### Esfoliante per il viso

**AZIONE** Riattiva la circolazione e favorisce il ricambio cellulare: la pelle viene purificata in profondità e preparata ad assorbire meglio i principi attivi di creme idratanti e antirughe. L'azione esfoliante ha effetti benefici anche sui punti neri che con le onde ultrasoniche si riducono o addirittura scompaiono. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

### Massaggio per il viso

**AZIONE** Incrementa l'elasticità e il tono dei tessuti riducendo la possibile formazione di cicatrici post acne e aumenta l'effetto di prodotti anti acne. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

### Levigante per il viso

**AZIONE** Leviga e distende le rughe (di espressione) e se usato in maniera preventiva può ritardare l'invecchiamento della pelle o impedire che si aggravi. L'ultrasuono grazie ai suoi effetti termici, riscalda i tessuti e favorisce processi biochimici e metabolici. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

### Levigante

**AZIONE** Richiama il plasma pulito in tutto lo spessore del derma e ridona la giusta dimensione fisiologica al connettivo cutaneo, migliorando sia l'elasticità che l'irregolarità superficiale della epidermide.

**QUANDO** È indicato in tutti quegli inestetismi cellulitici, nei quali la superficie cutanea presenta delle irregolarità, come la classica "Pelle a buccia d'arancia" e "Pelle Ruvida".

### Drenante

**AZIONE** La sua azione benefica facilita il drenaggio dei connettori linfatici e delle rispettive stazioni ghiandolari annesse, facilitando il riassorbimento dei liquidi.

**QUANDO** Beneficiando della sua azione drenante, è consigliato nel caso di cellulite edematosa, essendo i liquidi la principale causa, anch'esso consigliato contro la Pelle a buccia d'arancia.

### Riattivante

**AZIONE** Stimola e riattiva la circolazione sanguigna e linfatica per un miglioramento cutaneo, riattivando il metabolismo cellulare, favorendo lo scambio di liquidi tra le cellule.

**QUANDO** È indicato soprattutto negli stadi iniziali della cellulite, in quanto stimola e riattiva il metabolismo assopitosi.

### Veicolante

**AZIONE** Favorisce la penetrazione di creme, gel o altri prodotti nel tessuto biologico, favorendone l'assorbimento e quindi il loro effetto, indicato anche per trattamenti depilatori.

#### PROGRAMMA

##### ESTERNO BRACCIA

###### AZIONE

URTO	01
MODELLANTE	02
MANTENIMENTO	03



##### INTERNO BRACCIA

###### AZIONE

URTO	04
MODELLANTE	05
MANTENIMENTO	06



##### FIANCHI E SCHIENA

###### AZIONE

URTO	07
MODELLANTE	08
MANTENIMENTO	09



##### ADDOME

###### AZIONE

URTO	10
MODELLANTE	11
MANTENIMENTO	12



## PROGRAMMA

**CULOTTES CHEVAL**

## AZIONE

URTO	13
MODELLANTE	14
MANTENIMENTO	15

**GLUTEI**

## AZIONE

URTO	16
MODELLANTE	17
MANTENIMENTO	18

**ESTERNO COSCE**

## AZIONE

URTO	19
MODELLANTE	20
MANTENIMENTO	21

**INTERNO COSCE**

## AZIONE

URTO	22
MODELLANTE	23
MANTENIMENTO	24



## PROGRAMMA

**GINOCCHIA**

## AZIONE

URTO	25
MODELLANTE	26
MANTENIMENTO	27

**INTERNO GINOCCHIA**

## AZIONE

URTO	28
MODELLANTE	29
MANTENIMENTO	30

**POLPACCI**

## AZIONE

URTO	31
MODELLANTE	32
MANTENIMENTO	33

**BUCCIA D'ARANCIA**

## AZIONE

DRENANTE	34
LEVIGANTE	35
MANTENIMENTO	36



## PROGRAMMA

**PELLE RUVIDA**

## AZIONE

RIATTIVANTE	37
LEVIGANTE	38
MANTENIMENTO	39

**UOMO**

## AZIONE

URTO	40
MODELLANTE	41
MANTENIMENTO	42

**VEICOLANTE**

## AZIONE

ALTO	43
MEDIO	44
BASSO	45

**VISO**

## AZIONE

ESFOLIANTE	46
MASSAGGIO	47
LEVIGANTE	48



## PROGRAMMA

**CUOIO CAPELLUTO**

## AZIONE

STIMOLANTE	49
PULIZIA	50
ATTIVANTE	51

**IMMERSIONE**

## AZIONE

1 MHz	52
3 MHz	53

**TEST MANIPOLI**

Programma della durata di 2 minuti da utilizzare solo ed esclusivamente per verificare il corretto funzionamento del manipolo di trattamento


PROGRAMMA

114




**PATOLOGIA**
**ACNE E BRUFOLI**


FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5 - 1 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	99

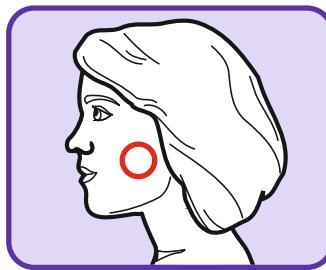
**PATOLOGIA**
**CELLULITE  
ARTI SUPERIORI**


FREQUENZA	1 - 3 MHz
POTENZA	1,0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 50%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	100

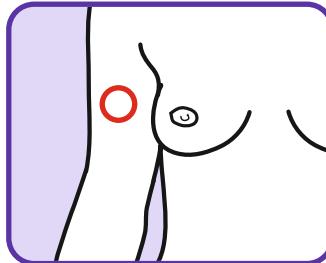
**PATOLOGIA**
**CELLULITE  
ARTI INFERIORI**


FREQUENZA	1 - 3 MHz
POTENZA	1,5 - 2 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	101

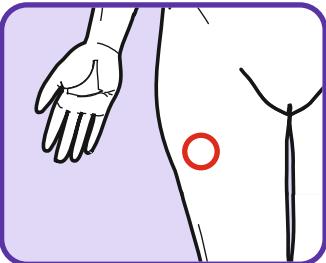
**PATOLOGIA**
**CELLULITE ADDOME**

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 50 - 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	102

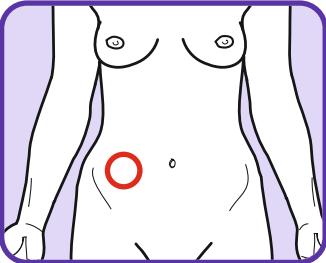
**PATOLOGIA**
**CELLULITE GLUTEI**

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 75 - 90%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	103

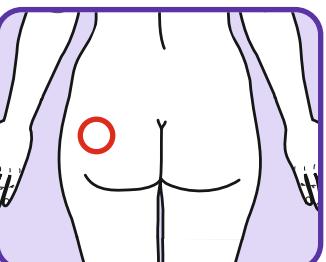

----- ENGLISH -----



## Programs for Aesthetic-Wellness use

 **Information**

*In programs where the area of the body to be treated allows it, the use of the ultrasonic handpiece can be replaced with double-head diffusers.*

## PROGRAMS

Application notes to use the device correctly, knowing which program to choose and the action it performs, thus fighting your imperfection as effectively as possible.

**Bump**

The ultrasound irradiation in this action causes a massage of considerable intensity, which by means of the oscillations penetrates deeper into the epidermis.

**ACTION** WHEN It should be used in all those advanced stages of localized cellulite, especially in the case of soft or flaccid cellulite.

**Modeling**

**ACTION** This therapy is widely used in cases of localized lipodystrophy by breaking the fibrotic tissue present which hinders both blood and lymphatic circulation.

**WHEN** Benefiting from its characteristic in shaping and stimulating it is particularly indicated in the case of hard or solid cellulite.

**Maintenance**

**ACTION** Its stimulating effect on local blood circulation improves skin turgor and cellular oxygenation, releasing excess fluids and toxins from the subcutaneous connective tissue.

**WHEN** It is indicated as maintaining the cycle of sessions carried out, in order not to lose the results achieved.

**Facial scrub**

**ACTION** It reactivates the circulation and promotes cell turnover: the skin is purified in depth and prepared to better absorb the active ingredients of moisturizing and anti-wrinkle creams. The exfoliating action also has beneficial effects on blackheads which are reduced or even disappear with ultrasonic waves. The treatment should be performed once a day.

**Face massage**

**ACTION** It increases the elasticity and tone of the tissues by reducing the possible formation of post-acne scars and increases the effect of anti-acne products. The treatment should be performed once a day.

**Smoothing for the face**

**ACTION** It smoothes and relaxes (expression) wrinkles and if used preventively it can delay skin aging or prevent it from worsening. Thanks to its thermal effects, ultrasound heats the tissues and promotes biochemical and metabolic processes. The treatment should be performed once a day.

**Smoothing**

It recalls the clean plasma throughout the thickness of the dermis and restores the right physiological dimension to the skin connective tissue, improving both the elasticity and the superficial irregularity of the epidermis.

**ACTION** **WHEN** It is indicated in all those cellulite blemishes, in which the skin surface has irregularities, such as the classic "Orange peel skin" and "Rough Skin".

**Draining**

**ACTION** Its beneficial action facilitates the drainage of the lymphatic connectors and of the respective attached glandular stations, facilitating the reabsorption of liquids.

**WHEN** Benefiting from its draining action, it is recommended in the case of edematous cellulitis, as liquids are the main cause, also recommended against orange peel skin.

**Reactivating**

**ACTION** Stimulates and reactivates blood and lymphatic circulation for skin improvement, reactivating cell metabolism, favoring the exchange of liquids between cells.

**WHEN** It is especially indicated in the initial stages of cellulite, as it stimulates and reactivates the dormant metabolism.

**Carrier**

It favors the penetration of creams, gels or other products into the biological tissue, favoring their absorption and therefore their effect, also indicated for depilatory treatments.

## PROGRAM

## OUTER ARMS

ACTION	
SHOCK	01
MODELING	02
MAINTENANCE	03



## INNER ARMS

ACTION	
SHOCK	04
MODELING	05
MAINTENANCE	06



## HIPS AND BACK

ACTION	
SHOCK	07
MODELING	08
MAINTENANCE	09



## ABDOMIN. AREA

ACTION	
SHOCK	10
MODELING	11
MAINTENANCE	12



PROGRAM	
<b>CULOTT. CHEVAL</b>	
ACTION	
SHOCK	13
MODELING	14
MAINTENANCE	15



PROGRAM	
<b>GLUTEUS MUSCLE</b>	
ACTION	
SHOCK	16
MODELING	17
MAINTENANCE	18



PROGRAM	
<b>OUTER THIGHS</b>	
ACTION	
SHOCK	19
MODELING	20
MAINTENANCE	21



PROGRAM	
<b>INNER THIGHS</b>	
ACTION	
SHOCK	22
MODELING	23
MAINTENANCE	24



PROGRAM	
<b>KNEES</b>	
ACTION	
SHOCK	25
MODELING	26
MAINTENANCE	27



PROGRAM	
<b>INNER KNEE</b>	
ACTION	
SHOCK	28
MODELING	29
MAINTENANCE	30



PROGRAM	
<b>CALVES</b>	
ACTION	
SHOCK	31
MODELING	32
MAINTENANCE	33



PROGRAM	
<b>CELLULITE</b>	
ACTION	
DRAINING	34
SMOOTHING	35
MAINTENANCE	36



PROGRAM	
<b>ROUGH SKIN</b>	
ACTION	
REACTIVATING	37
SMOOTHING	38
MAINTENANCE	39



PROGRAM	
<b>MAN</b>	
ACTION	
SHOCK	40
MODELING	41
MAINTENANCE	42



PROGRAM	
<b>VEHICULATING</b>	
ACTION	
HIGH	43
MEDIUM	44
LOW	45



PROGRAM	
<b>SCALP</b>	
ACTION	
STIMULATING	49
CLEANING	50
ACTIVATING	51



PROGRAM	
<b>IMMERSION</b>	
ACTION	
1 MHz	52
3 MHz	53



#### PROBE TESTING


2-minute program to be used only and exclusively to check the correct functioning of the treatment handpiece

PROGRAM 114




**PATHOLOGY**
**ACNE AND SPOTS**


FREQUENCY	3 MHz
POWER	0,5 - 1 W/cm <sup>2</sup>
EMISSION	puls. 75%
DURATION max	12 minutes
PROGRAM	99

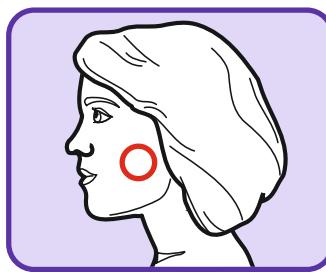
**PATHOLOGY**
**CELLULITE  
UPPER LIMBS**


FREQUENCY	1 - 3 MHz
POWER	1,0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSION	puls. 50%
DURATION max	12 minutes
PROGRAM	100

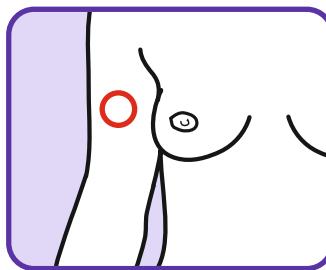
**PATHOLOGY**
**CELLULITE LOWER LIMBS**


FREQUENCY	1 - 3 MHz
POWER	1,5 - 2 W/cm <sup>2</sup>
EMISSION	puls. 75%
DURATION max	12 minutes
PROGRAM	101

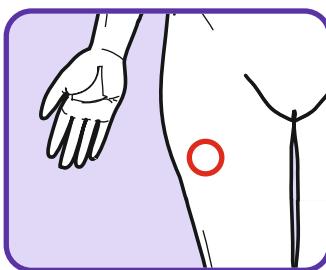
**PATHOLOGY**
**CELLULITE ABDOMEN**

FREQUENCY	1 MHz
POWER	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSION	puls. 50 - 75%
DURATION max	12 minutes
PROGRAM	102

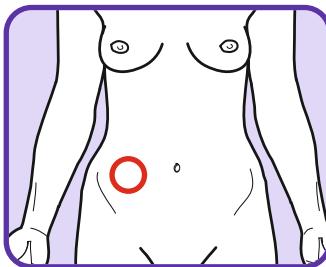
**PATHOLOGY**
**CELLULITE BUTTOCKS**

FREQUENCY	1 MHz
POWER	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSION	puls. 75 - 90%
DURATION max	12 minutes
PROGRAM	103

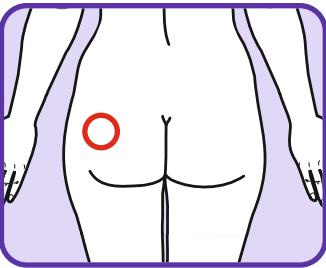

# ----- FRANÇAIS -----



## Programmes à usage esthétique - bien-être

### **Informations**

*Dans les programmes où la zone du corps à traiter le permet, l'utilisation de la pièce à main à ultrasons peut être remplacée par des diffuseurs à double tête.*

## PROGRAMMES

Notes d'application pour utiliser correctement l'appareil, savoir quel programme choisir et l'action qu'il exécute, luttant ainsi le plus efficacement possible contre votre imperfection.

**Cogner**

**ACTION** L'irradiation par ultrasons dans cette action provoque un massage d'une intensité considérable qui, au moyen des oscillations, pénètre plus profondément dans l'épiderme.

**LORSQUE** Il doit être utilisé dans tous les stades avancés de la cellulite localisée, en particulier dans le cas de la cellulite molle ou flasque.

**Modélation**

**ACTION** Cette thérapie est largement utilisée dans les cas de lipodystrophie localisée par rupture du tissu fibronique présent qui entrave à la fois la circulation sanguine et lymphatique.

**LORSQUE** Bénéficiant de ses propriétés galbantes et stimulantes, il est particulièrement indiqué en cas de cellulite dure ou solide.

**Maintenance**

**ACTION** Son effet stimulant sur la circulation sanguine locale améliore le trophisme cutané et l'oxygénation cellulaire, libérant l'excès de fluides et de toxines du tissu conjonctif sous-cutané.

**LORSQUE** Il est indiqué pour maintenir le cycle de séances effectuées, afin de ne pas perdre les résultats obtenus.

**Gommage du visage**

**ACTION** Il réactive la circulation et favorise le renouvellement cellulaire : la peau est purifiée en profondeur et préparée pour mieux absorber les actifs des crèmes hydratantes et anti-rides. L'action exfoliante a également des effets bénéfiques sur les points noirs qui s'atténuent voire disparaissent grâce aux ultrasons. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

**Massage du visage**

**ACTION** Il augmente l'élasticité et la tonicité des tissus en réduisant la formation possible de cicatrices post-acnéiques et augmente l'effet des produits anti-acnéiques. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

**Lissage pour le visage**

**ACTION** Il lisse et détend les rides (d'expression) et s'il est utilisé à titre préventif, il peut retarder le vieillissement cutané ou l'empêcher de s'aggraver. Grâce à leurs effets thermiques, les ultrasons chauffent les tissus et favorisent les processus biochimiques et métaboliques. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

**Lissage**

**ACTION** Il rappelle le plasma propre dans toute l'épaisseur du derme et redonne la juste dimension physiologique au tissu conjonctif cutané, améliorant à la fois l'élasticité et l'irrégularité superficielle de l'épiderme.

**LORSQUE** Il est indiqué dans toutes les imperfections de la cellulite, dans lesquelles la surface de la peau présente des irrégularités, telles que les classiques "Peau d'orange" et "Peau rugueuse".

**Évacuation**

**ACTION** Son action bénéfique facilite le drainage des connecteurs lymphatiques et des stations glandulaires attachées respectives, facilitant la réabsorption des liquides.

**LORSQUE** Bénéficiant de son action drainante, il est recommandé en cas de cellulite œdémateuse, car les liquides en sont la cause principale, également recommandé contre la peau d'orange.

**Réactivation**

**ACTION** Stimule et réactive la circulation sanguine et lymphatique pour l'amélioration de la peau, réactive le métabolisme cellulaire, favorisant l'échange de liquides entre les cellules.

**LORSQUE** Il est particulièrement indiqué dans les stades initiaux de la cellulite, car il stimule et réactive le métabolisme somnolent.

**Transporteur**

**ACTION** Il favorise la pénétration des crèmes, gels ou autres produits dans le tissu biologique, favorisant leur absorption et donc leur effet, également indiqué pour les traitements dépilatoires.

**PROGRAMME****EXTER. BRAS**

ACTION	
CHOC	01
MODELANTE	02
MAINTIEN	03

**INTER. BRAS**

ACTION	
CHOC	04
MODELANTE	05
MAINTIEN	06

**HANCHES-DOS**

ACTION	
CHOC	07
MODELANTE	08
MAINTIEN	09

**ABDOMEN**

ACTION	
CHOC	10
MODELANTE	11
MAINTIEN	12



PROGRAMME	
<b>CULOTT. CHEVAL</b>	ACTION
CHOC	13
MODELANTE	14
MAINTIEN	15



FESSES	
ACTION	
CHOC	16
MODELANTE	17
MAINTIEN	18



EXTER. CUISSE	
ACTION	
CHOC	19
MODELANTE	20
MAINTIEN	21



INTER. CUISSE	
ACTION	
CHOC	22
MODELANTE	23
MAINTIEN	24



PROGRAMME	
<b>GENOUX</b>	ACTION
CHOC	25
MODELANTE	26
MAINTIEN	27



INTER. GENOUX	
ACTION	
CHOC	28
MODELANTE	29
MAINTIEN	30



MOLLETS	
ACTION	
CHOC	31
MODELANTE	32
MAINTIEN	33



PEAU D' ORANGE	
ACTION	
DRENANTE	34
LISSANTE	35
MAINTIEN	36



PROGRAMME	
<b>PEAU RECHE</b>	ACTION
REACTIVANTE	37
LISSANTE	38
MAINTIEN	39



<b>HOMME</b>	
ACTION	
CHOC	40
MODELANTE	41
MAINTIEN	42



<b>VEHICULANT</b>	
ACTION	
HAUT	43
MOYEN	44
BAS	45



<b>VISAGE</b>	
ACTION	
EXFOLIANTE	46
MASSAGE	47
LISSANTE	48



PROGRAMME	
<b>CUIR CHEVELU</b>	ACTION
STIMULANTE	49
NETTOYAGE	50
ACTIVANTE	51



<b>IMMERS.</b>	
ACTION	
1 MHz	52
3 MHz	53



### TEST MANCHE

Programme de 2 minutes à utiliser uniquement et exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement de la pièce à main de traitement


PROGRAMME 114



## PATHOLOGIE

**ACNE ET BOUTONS**


FRÉQUENCE	3 MHz
PUISANCE	0,5 - 1 W/cm <sup>2</sup>
ÉMISSIONS	pulsé 75%
TEMPS max	12 minutes
PROGRAMME	99

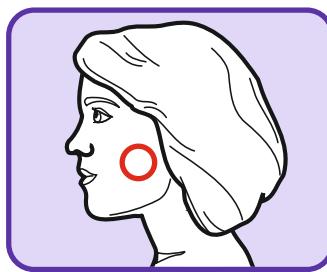

## PATHOLOGIE

**CELLULITE MEMBRES SUP.**


FRÉQUENCE	1 - 3 MHz
PUISANCE	1,0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
ÉMISSIONS	pulsé. 50%
TEMPS max	12 minutes
PROGRAMME	100

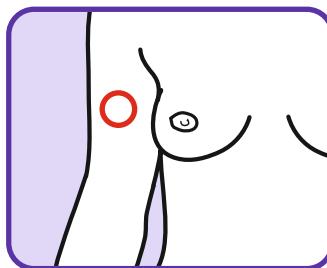

## PATHOLOGIE

**CELLULITE MEMBRES INF.**


FRÉQUENCE	1 - 3 MHz
PUISANCE	1,5 - 2 W/cm <sup>2</sup>
ÉMISSIONS	pulsé. 75%
TEMPS max	12 minutes
PROGRAMME	101

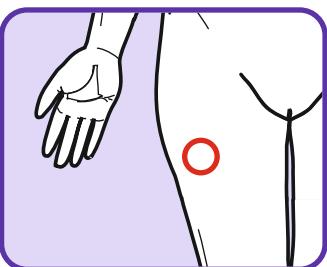

## PATHOLOGIE

**CELLULITE ABDOMEN**


FRÉQUENCE	1 MHz
PUISANCE	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
ÉMISSIONS	pulsé. 50 - 75%
TEMPS max	12 minutes
PROGRAMME	102

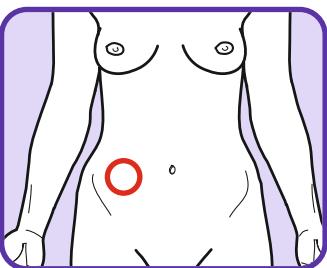

## PATHOLOGIE

**CELLULITE REG. FESSIERE**

FRÉQUENCE	1 MHz
PUISANCE	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
ÉMISSIONS	pulsé. 75 - 90%
TEMPS max	12 minutes
PROGRAMME	103

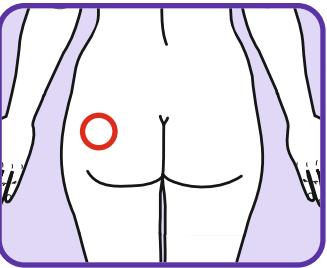

# ----- ESPAÑOL -----



## Programas de uso estético - bienestar

### Información

*En programas donde la zona del cuerpo a tratar lo permite, el uso de la pieza de mano ultrasónica puede sustituirse por difusores de doble cabezal.*

## PROGRAMAS

Notas de aplicación para utilizar correctamente el dispositivo, sabiendo qué programa elegir y la acción que realiza, combatiendo así tu imperfección de la forma más eficaz posible.

**Protuberancia**

**ACCIÓN** La irradiación de ultrasonidos en esta acción provoca un masaje de considerable intensidad, que mediante las oscilaciones penetra más profundamente en la epidermis.

**CUANDO** Debe utilizarse en todas aquellas etapas avanzadas de celulitis localizada, especialmente en el caso de celulitis blanda o flácida.

**Modelado**

**ACCIÓN** Esta terapia es muy utilizada en casos de lipodi-trofia localizada al romper el tejido fibrótico presente que dificulta tanto la circulación sanguínea como linfática.

**CUANDO** Beneficiándose de su característica moldeadora y estimulante, está especialmente indicada en el caso de celulitis dura o sólida.

**Mantenimiento**

**ACCIÓN** Su efecto estimulante sobre la circulación sanguínea local mejora el trofismo cutáneo y la oxigenación celular, liberando el exceso de líquidos y toxinas del tejido conectivo subcutáneo.

**CUANDO** Está indicado como mantenimiento del ciclo de sesiones realizadas, con el fin de no perder los resultados conseguidos.

**Exfoliante facial**

**ACCIÓN** Reactiva la circulación y favorece el recambio celular: la piel se purifica en profundidad y se prepara para absorber mejor los principios activos de las cremas hidratantes y antiarrugas. La acción exfoliante también tiene efectos beneficiosos sobre los puntos negros que se reducen o incluso desaparecen con las ondas ultrasónicas. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

**Masaje facial**

Aumenta la elasticidad y el tono de los tejidos al reducir la posible formación de cicatrices post acné y aumenta el efecto de los productos anti-acné. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

**Suavizante para el rostro**

Suaviza y relaja (expresión) las arrugas y, si se usa de forma preventiva, puede retrasar el envejecimiento de la piel o evitar que empeore. Gracias a sus efectos térmicos, el ultrasonido calienta los tejidos y favorece los procesos bioquímicos y metabólicos. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

**Suavizado**

**ACCIÓN** Recupera el plasma limpio en todo el espesor de la dermis y devuelve la dimensión fisiológica adecuada al tejido conectivo de la piel, mejorando tanto la elasticidad como la irregularidad superficial de la epidermis.

**CUANDO** Está indicado en todas aquellas imperfecciones de la celulitis, en las que la superficie cutánea presenta irregularidades, como las clásicas "Piel de naranja" y "Piel rugosa".

**Drenaje**

**ACCIÓN** Su acción beneficiosa facilita el drenaje de los conectores linfáticos y las respectivas estaciones glandulares adheridas, facilitando la reabsorción de líquidos.

**CUANDO** Beneficiándose de su acción drenante, se recomienda en el caso de celulitis edematosas, ya que los líquidos son la principal causa, recomendada también contra la piel de naranja.

**Reactivando**

**ACCIÓN** Estimula y reactiva la circulación sanguínea y linfática para la mejora de la piel, reactivando el metabolismo celular, favoreciendo el intercambio de líquidos entre las células.

**CUANDO** Está especialmente indicado en las etapas iniciales de la celulitis, ya que estimula y reactiva el metabolismo somnoliento.

**Transportador**

**ACCIÓN** Favorece la penetración de cremas, geles u otros productos en el tejido biológico, favoreciendo su absorción y por tanto su efecto, también indicado para tratamientos depilatorios.

**PROGRAMA****EXTER. BRAZOS****ACCIÓN**

CHOQUE	01
MODELADORA	02
MANTENIMIENTO	03

**INTER. BRAZOS****ACCIÓN**

CHOQUE	04
MODELADORA	05
MANTENIMIENTO	06

**CADERAS-ESPAL****ACCIÓN**

CHOQUE	07
MODELADORA	08
MANTENIMIENTO	09

**ABDOMEN****ACCIÓN**

CHOQUE	10
MODELADORA	11
MANTENIMIENTO	12



**PROGRAMMA**
**CULOTT. CHEVAL**
**ACCIÓN**

CHOQUE	13
MODELADORA	14
MANTENIMIENTO	15


**PROGRAMMA**
**PIEL ASPERA**
**ACCIÓN**

REACTIVADORA	37
ALISADORA	38
MANTENIMIENTO	39


**GLUTEOS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	16
MODELADORA	17
MANTENIMIENTO	18


**HOMBRE**
**ACCIÓN**

CHOQUE	40
MODELADORA	41
MANTENIMIENTO	42


**ESTER. MUSLOS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	19
MODELADORA	20
MANTENIMIENTO	21


**VEHICULANTE**
**ACCIÓN**

ALTA	43
MEDIA	44
BAJA	45


**INTER. MUSLOS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	22
MODELADORA	23
MANTENIMIENTO	24


**ROSTRO**
**ACCIÓN**

EXFOLIANTE	46
MASAJE	47
ALISADORA	48


**PROGRAMMA**
**RODILLAS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	25
MODELADORA	26
MANTENIMIENTO	27


**PROGRAMMA**
**CUERO CABEL.**
**ACCIÓN**

ESTIMULANTE	49
LIMPIADORA	50
ACTIVADORA	51


**INTER. RODILLAS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	28
MODELADORA	29
MANTENIMIENTO	30


**IMMERS.**
**ACCIÓN**

1 MHz	52
3 MHz	53


**PANTORILLAS**
**ACCIÓN**

CHOQUE	31
MODELADORA	32
MANTENIMIENTO	33


**PIEL NARANJA**
**ACCIÓN**

DRENANTE	34
ALISADORA	35
MANTENIMIENTO	36


**TEST APlicad.**

Programa de 2 minutos para utilizar única y exclusivamente para comprobar el correcto funcionamiento de la pieza de mano de tratamiento

PROGRAMMA


114



## PATOLOGÍA

**ACNE Y GRANOS**


FRECUENCIA	3 MHz
POTENCIA	0,5 - 1 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	pulsata al 75%
TIEMPO máx.	12 minutos
PROGRAMA	99

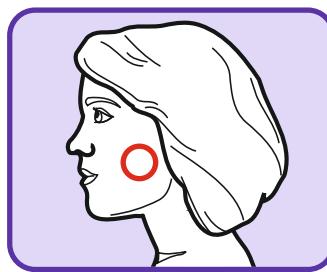

## PATOLOGÍA

**CELULITIS EXTR. SUPER.**


FRECUENCIA	1 - 3 MHz
POTENCIA	1,0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 50%
TIEMPO máx.	12 minutos
PROGRAMA	100

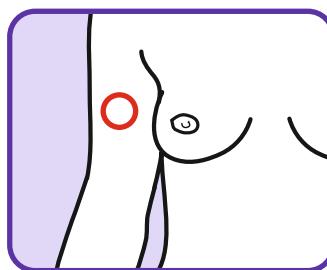

## PATOLOGÍA

**CELULITIS EXTR. INFER.**


FRECUENCIA	1 - 3 MHz
POTENCIA	1,5 - 2 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 75%
TIEMPO máx.	12 minutos
PROGRAMA	101

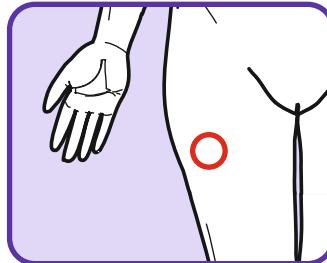

## PATOLOGÍA

**CELULITIS ABDOMEN**


FRECUENCIA	1 MHz
POTENCIA	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 50 - 75%
TIEMPO máx.	12 minutos
PROGRAMA	102

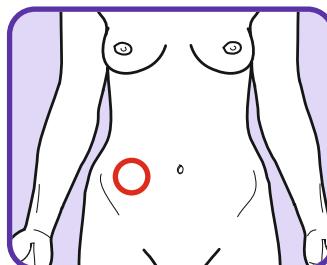

## PATOLOGÍA

**CELULITIS GLUTEOS**

FRECUENCIA	1 MHz
POTENCIA	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONE	puls. 75 - 90%
TIEMPO máx.	12 minutos
PROGRAMA	103

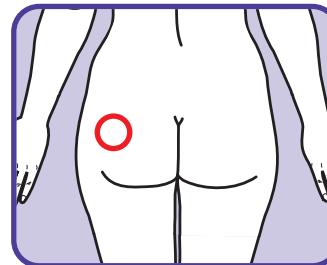

----- DEUTSCH -----



## Programme für Beauty & Wellness

### Information

Bei Programmen, bei denen es der zu behandelnde Körperbereich zulässt, kann die Verwendung des Ultraschallhandstücks durch Doppelkopfdiffusoren ersetzt werden.

## PROGRAMME

Anwendungshinweise, um das Gerät richtig zu verwenden, zu wissen, welches Programm Sie wählen und welche Aktion es ausführt, um Ihre Unvollkommenheit so effektiv wie möglich zu bekämpfen.

**Stoßen**

**HANDLUNG** Die Ultraschallbestrahlung bewirkt dabei eine Massage von beträchtlicher Intensität, die durch die Schwingungen tiefer in die Epidermis eindringt.

**WENN** Es sollte in all diesen fortgeschrittenen Stadien der lokalisierten Cellulite verwendet werden, insbesondere bei weicher oder schlaffer Cellulite.

**Modellieren**

**HANDLUNG** Diese Therapie wird häufig bei lokalisierter Lipodistrophie eingesetzt, indem das vorhandene fibronische Gewebe aufgebrochen wird, das sowohl den Blut- als auch den Lymphkreislauf behindert.

**WENN** Aufgrund seiner formgebenden und stimulierenden Eigenschaften ist es besonders bei harter oder fester Cellulite indiziert.

**Instandhaltung**

**HANDLUNG** Seine stimulierende Wirkung auf die lokale Durchblutung verbessert den Hauttrophismus und die zelluläre Sauerstoffversorgung, indem überschüssige Flüssigkeiten und Giftstoffe aus dem subkutanen Bindegewebe freigesetzt werden.

**WENN** Es wird angezeigt, den Zyklus der durchgeföhrten Sitzungen beizubehalten, um die erzielten Ergebnisse nicht zu verlieren.

**Gesichtspeeling**

**HANDLUNG** Es reaktiviert die Durchblutung und fördert den Zellumsatz: Die Haut wird in der Tiefe gereinigt und auf die Aufnahme der Wirkstoffe von Feuchtigkeits- und Anti-Falten-Cremes vorbereitet. Die Peeling-Wirkung hat auch positive Auswirkungen auf Mitesser, die durch Ultraschallwellen reduziert oder sogar verschwinden. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

**Gesichtsmassage**

**HANDLUNG** Es erhöht die Elastizität und den Tonus des Gewebes, indem es die mögliche Bildung von Narben nach der Akne reduziert und die Wirkung von Anti-Akne-Produkten erhöht. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

**Glättung für das Gesicht**

**HANDLUNG** Es glättet und entspannt (Ausdrucks-)Falten und kann bei präventiver Anwendung die Hautalterung verzögern oder einer Verschlechterung vorbeugen. Dank seiner thermischen Wirkung erwärmt Ultraschall das Gewebe und fördert biochemische und metabolische Prozesse. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

**Glätten**

**HANDLUNG** Es ruft das saubere Plasma über die gesamte Dicke der Dermis zurück und stellt die richtige physiologische Dimension des Hautbindegewebes wieder her, wodurch sowohl die Elastizität als auch die oberflächliche Unregelmäßigkeit der Epidermis verbessert werden.

**WENN** Es ist indiziert bei all jenen Cellulite-Unreinheiten, bei denen die Hautoberfläche Unregelmäßigkeiten aufweist, wie die klassische "Orangenhaut" und "Rough Skin".

**Entleeren**

**HANDLUNG** Seine wohltuende Wirkung erleichtert die Drainage der Lymphknoten und der jeweils angeschlossenen Drüsestationen und erleichtert die Rückresorption von Flüssigkeiten.

**WENN** Aufgrund seiner entwässernden Wirkung wird es bei ödematöser Zellulitis empfohlen, da Flüssigkeiten die Hauptursache sind, auch bei Orangenhaut.

**Reaktivieren**

**HANDLUNG** Stimuliert und reaktiviert die Blut- und Lymphzirkulation zur Verbesserung der Haut, reaktiviert den Zellstoffwechsel und fördert den Flüssigkeitsaustausch zwischen den Zellen.

**WENN** Es ist besonders in den Anfangsstadien von Cellulite angezeigt, da es den schläfrigen Stoffwechsel anregt und reaktiviert.

**Träger**

**HANDLUNG** Es begünstigt das Eindringen von Cremes, Gelen oder anderen Produkten in das biologische Gewebe, begünstigt ihre Absorption und damit ihre Wirkung, auch für Enthaarungsbehandlungen geeignet.

**PROGRAMM**
**ARM-AUSSENS**
**HANDLUNG**

STOSS	01
MODELLIEREN	02
BLEIB. WIRKUNG	03


**ARM-INNENS**
**HANDLUNG**

STOSS	04
MODELLIEREN	05
BLEIB. WIRKUNG	06


**RUMP. -RUECKEN**
**HANDLUNG**

STOSS	07
MODELLIEREN	08
BLEIB. WIRKUNG	09


**BAUCH**
**HANDLUNG**

STOSS	10
MODELLIEREN	11
BLEIB. WIRKUNG	12



## PROGRAMM

**BECKENSEITEN**

## HANDLUNG

STOSS	13
MODELLIEREN	14
BLEIB. WIRKUNG	15



## PROGRAMM

**RAUHE HAUT**

## HANDLUNG

REAKTIVIEREN	37
GLATTEN	38
BLEIB. WIRKUNG	39


**GESEAESSMUSKEL**

## HANDLUNG

STOSS	16
MODELLIEREN	17
BLEIB. WIRKUNG	18


**MANN**

## HANDLUNG

URTO	40
MODELLANTE	41
BLEIB. WIRKUNG	42


**OBERSCH. -AUS**

## HANDLUNG

STOSS	19
MODELLIEREN	20
BLEIB. WIRKUNG	21


**UEBERTRAGEN**

## HANDLUNG

HOCH	43
MITTEL	44
NIEDRIG	45


**OBERSCH. -INN**

## HANDLUNG

STOSS	22
MODELLIEREN	23
BLEIB. WIRKUNG	24


**GESICHT**

## HANDLUNG

REGENERIEREN	46
MASSAGE	47
GLATTEN	48



## PROGRAMM

**KNIE**

## HANDLUNG

STOSS	25
MODELLIEREN	26
BLEIB. WIRKUNG	27



## PROGRAMM

**KOPFHAUT**

## HANDLUNG

STIMULATION	49
REINIGUNG	50
AKTIVIERUNG	51


**KNIE-INNENS.**

## HANDLUNG

STOSS	28
MODELLIEREN	29
BLEIB. WIRKUNG	30


**EINTAUCH.**

## HANDLUNG

1 MHz	52
3 MHz	53


**WADEN**

## HANDLUNG

STOSS	31
MODELLIEREN	32
BLEIB. WIRKUNG	33


**ORANGENHAUT**

## HANDLUNG

DRAENUNG	34
GLATTEN	35
BLEIB. WIRKUNG	36


**BEHANDL. -TEST**

2-Minuten-Programm nur und ausschließlich zur Überprüfung der korrekten Funktion des Behandlungshandstücks


PROGRAMM      114



**PATHOLOGIE**

**AKNE UND PICKEL**


FREQUENZ	3 MHz
STAERKE	0,5 - 1 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONEN	gep. 75%
ZEIT max	12 Minuten
PROGRAMM	99

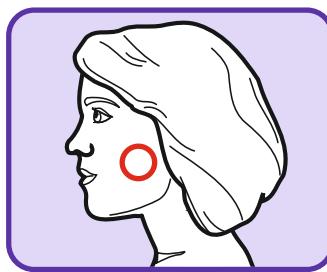

**PATHOLOGIE**

**ZELLULITIS  
OBEREN GLIED**


FREQUENZ	1 - 3 MHz
STAERKE	1,0 - 1,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONEN	gep. 50%
ZEIT max	12 Minuten
PROGRAMM	100

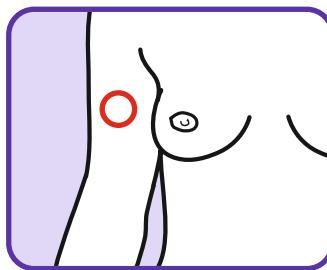

**PATHOLOGIE**

**ZELLULITIS  
UNTER. GLIED**


FREQUENZ	1 - 3 MHz
STAERKE	1,5 - 2 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONEN	gep. 75%
ZEIT max	12 Minuten
PROGRAMM	101

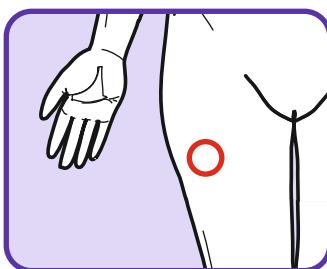

**PATHOLOGIE**

**ZELLULITIS AM BAUCH**


FREQUENZ	1 MHz
ENERGIE	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONEN	gep. 50 - 75%
ZEIT max	12 Minuten
PROGRAMM	102

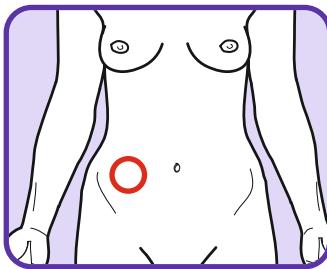

**PATHOLOGIE**

**ZELLULITIS POBACKEN**

FREQUENZ	1 MHz
STAERKE	2 - 2,5 W/cm <sup>2</sup>
EMISSIONEN	gep. 75 - 90%
ZEIT max	12 Minuten
PROGRAMM	103

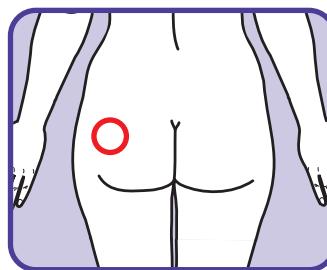





---

**MADE IN ITALY**